


PIEZON® PS

SINGURUL ȘI UNICUL
O CAPODOPERĂ ELVEȚIANĂ

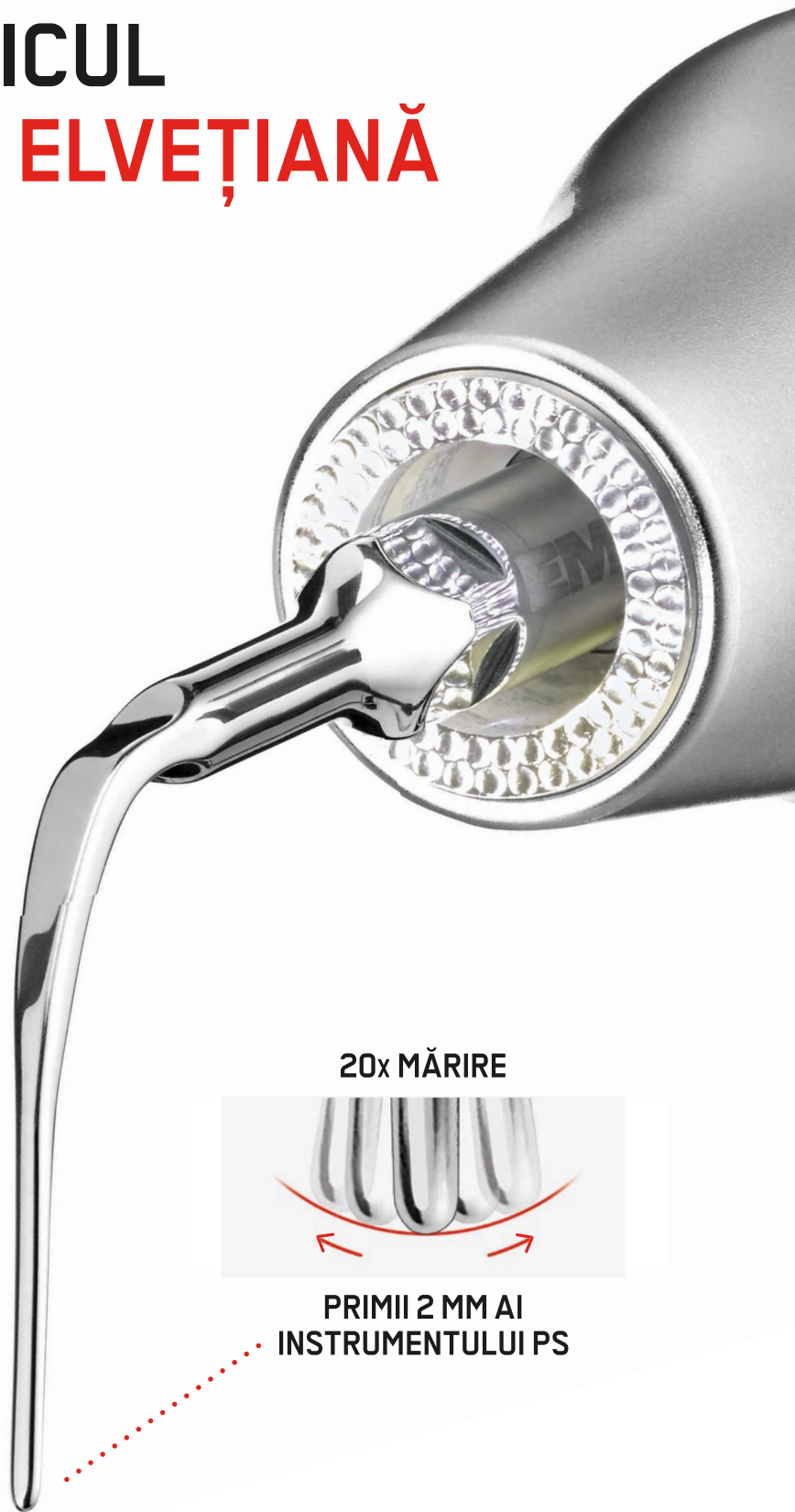

20x MĂRIRE

PRIMII 2 MM AI
INSTRUMENTULUI PS


EMS 
MAKE ME SMILE.

SINGURUL ȘI UNICUL DETARTRAJUL ESTE UȘOR

INSTRUMENTUL PIEZON® PS NO PAIN SE POTRIVEȘTE PERFECT ÎN 95% DIN SITUAȚII.

► Detartraj supra- și subgingival și debridare parodontală - Instrumentul EMS Perio Slim, este REFERINȚA pentru Prevenție și Profilaxie. În timp ce alții sugerează mai multe instrumente pentru o debridare completă a gurii, EMS a dezvoltat instrumentul original PIEZON® PS NO PAIN. Instrumentul PS face totul!


Conceput pentru a fi la fel de subțire și la fel de neted ca o sondă parodontală, instrumentul original PIEZON® PS NO PAIN este blând cu gingiile, minim invaziv, maxim preventiv și păstrează epiteliul datorită mișcărilor sale perfect liniare. Pentru a asigura tratamentul FĂRĂ DURERE, utilizați primii 1-2 mm ai instrumentului.

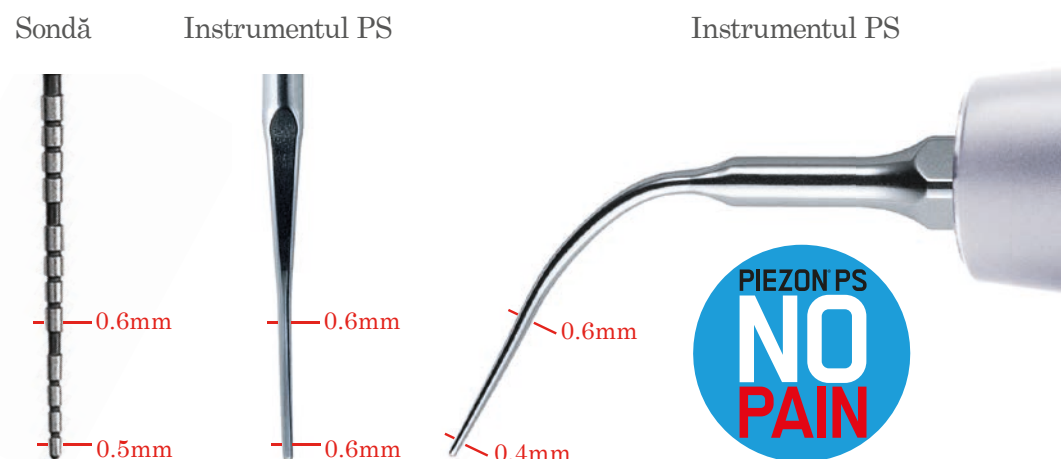

Munca Dumneavoastră clinică devine mult mai ușoară prin utilizarea unui singur instrument. Instrumentul nostru de antrenament PIEZON® PS special creat, vă ajută să deveniți un adevărat PIEZON® PS Master.

De asemenea, cursurile Swiss Dental Academy vă ajută să vă îmbunătățiți abilitățile.

Instrumentul PIEZON® PS NO PAIN poate fi utilizat sub și supragingival, în toate cadranele, până la 10 mm. Eficiența constantă este garantată pe toată durata de viață: +1000 de tratamente. Eficiența sa de curățare și confortul extrem pentru pacienți sunt dovedite științific.

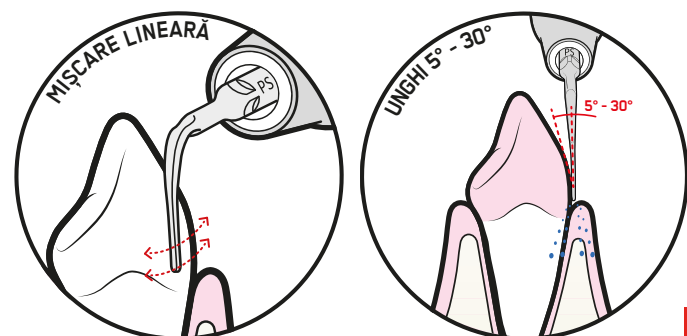

**ACCESAȚI
PREVENȚIILE CLINICE ALE
INSTRUMENTULUI PIEZON® PS**



ARMONIE ELVEȚIANĂ PERFECTĂ REZULTATUL ESTE NO PAIN

► Sistemul original PIEZON® NO PAIN este compus din 3 elemente: instrumentul PIEZON® PS NO PAIN, piesa de mână tehnologie înaltă PIEZON® și software-ul electronic modern NO PAIN.




► Tehnologia sistemului PIEZON® a fost inventată inițial în Elveția în 1981 de Pierre Mabilie, co-fondator al EMS și fost proprietar al companiei franceze Satelec. A fost reproiectată cu toată expertiza tehnică de la Valley-de-Joux și în colaborare cu Jaeger-LeCoultre (renumitul ceasornicar), precum și furnizorii săi exclusivi.

► De atunci, a fost îmbunătățită constant pentru a garanta cel mai confortabil și eficient tratament. Utilizează piezoceramică pentru a converti semnalul electronic inteligent al modului NO PAIN într-o mișcare vibrațională mecanică. Aceasta activează instrumentul PIEZON® PS NO PAIN într-o mișcare perfect liniară.

► Tehnologia PIEZON® NO PAIN oferă un confort ridicat pacientului. Piesa de mână înregistrează intuitiv tartrul recunoscând rezistența mai mare, apoi dispozitivul crește automat puterea la vârf pentru a elimina eficient tartrul.

► Numai instrumentele și piesele de mână EMS PIEZON® originale reușesc să folosească puterea PIEZON® în întregime și asigură respectarea anatomiei dintelui și un tratament confortabil pacienților.

20x MĂRIRE

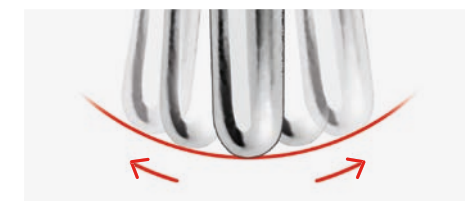

**PRIMII 2 MM AI
INSTRUMENTULUI PS**

**DESCOPERIȚI
MIȘCAREA
LINEARĂ**



SOLUȚIA NOSTRĂ PENTRU TOATE SITUAȚIILE

PENTRU SITUAȚII SPECIALE, CUM AR FI TARTRUL FOARTE DUR SAU ZONELE INTERPROXIMALE, EMS A CREAT INSTRUMENTE DEDICATE ȘI EFICIENTE.



► Instrumentul PIEZON® P este utilizat în principal pentru îndepărtarea tartrului dur, rezistent supragingival și subgingival (până la 4 mm) din toate cadranele. Este cea mai recentă evoluție a instrumentului PIEZON® A, care nu mai este disponibil.

► Instrumentele PIEZON® PSR și PSL sunt recomandate pentru suprafețele interproximale distale și meziale greu accesibile, cu eficacitate și confort superioare, supragingivale și subgingivale, de până la 8 mm. Instrumentele PIEZON® PSR și PSL prezintă o eficacitate superioară în îndepărtarea tartrului dur în comparație cu instrumentul PIEZON® PS NO PAIN. Ele economisesc timp, mai ales în terapia parodontală inițială și sunt indicate numai pacienților adulți.

► Instrumentul PIEZON® PI are o acoperire a

vârfului realizată din PolyEther Ether Ketone (PEEK) de înaltă tehnologie care curăță în siguranță suprafețele sensibile ale bonturilor și restaurărilor implantului. Debridează cu ușurință placa cu precizie chirurgicală datorită mișcărilor sale liniare și a oțelului inoxidabil de calitate medicală. Este ideal pentru întreținerea minim invazivă a implanturilor și pentru confortul maxim al pacientului.

REFERINȚELE PENTRU COMANDA DUMNEAVOASTRĂ:

INSTRUMENT PIEZON PS

REF DS-016A

INSTRUMENT PIEZON P

REF DS-011A

INSTRUMENT PIEZON PSR + PSL

REF FS-461

INSTRUMENT PIEZON PI

REF DT-065A


FILE HOLDER 120°

REF DS-010A

TREBUIE SĂ EXERSEZI PENTRU A DEVENI UN MAESTRU

► Exersați-vă abilitățile cu PIEZON® PS instrumentul de antrenament! Nimic nu întrece un antrenament adecvat și aplicarea corectă a metodelor de tratament recomandate pentru a obține efectul PIEZON® NO PAIN.

► Utilizați întotdeauna instrumentul PIEZON® PS NO PAIN pe partea laterală a dintelui cu primii 1-2mm ai instrumentului pentru a asigura un tratament FĂRĂ DURERE.

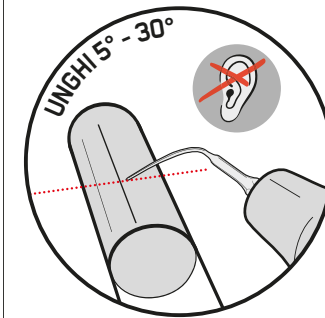

► Setările adecvate ale dispozitivului, angularea, presiunea adecvată și mișcările rapide înainte și înapoi sunt cheia pentru a oferi un tratament minim invaziv și confortabil.

► Dacă produceți un zgomot deranjant, este posibil să provocați durere!

► Dacă nu produceți zgomot, totul este în regulă!

SECVENȚĂ CORECTĂ DE UTILIZARE:

1. SETĂRI CORECTE – Setați AFPM cu setările NO PAIN: minim 70% apă și maxim 60% putere.

2. ADAPTARE – Țineți instrumentul original PIEZON® PS NO PAIN paralel cu tubul adaptând latura laterală.

3. ANGULAREA – Angulați instrumentul cu o ușoară tangentă (5° - 30°). Doar primii 1-2 mm ar trebui să fie în contact cu tartrul artificial.

4. PRESIUNE – Lăsați instrumentul să funcționeze fără efort, fără presiune.

5. MIȘCAREA – Faceți mișcări mici înainte și înapoi de-a lungul tubului. Simțiți mișcarea liniară.

URMĂRIȚI
VIDEO PENTRU A
ÎNVAȚA DESPRE
UTILIZAREA
OPTIMĂ A
INSTRUMENTULUI
PIEZON® PS



SETĂRILE OPTIME NO PAIN

RECOMANDĂRI:


- Utilizați doar părțile laterale ale instrumentului, deplasându-vă în jurul dintelui.
- Folosiți doar extremitatea instrumentului.
- Primii 1-2 mm ai instrumentului reprezintă partea cea mai activă.

Instr.	Caz	Putere Recomandată	Apă Recomandată	Sugestii
	Supragingival	10% - 100%	70% to 100%	Începeți la o putere mică și creșteți dacă e nevoie.
	Subgingival → 10mm	10% - 60%		
	Copii	10% - 60%		
PSL PSR	Supra- și subgingival Zone aproximale → 8mm	10% - 60%		Precauții: acest instrument este angulat (stânga sau dreapta) și este mult mai puternic decât PS. Începeți la o putere mică și creșteți dacă este nevoie.
	Tartru dur Supragingival și subgingival → 4mm	10% - 60%		
PI	Implanturi Supra- și subgingival → 3mm	10% - 60%		Începeți la o putere mică și creșteți dacă este nevoie.

VERIFICAȚI-VĂ INSTRUMENTUL PS



- Verificați întotdeauna uzura instrumentului Dumneavoastră PIEZON® PS NO PAIN pentru a asigura confort maxim pacienților în timpul tratamentului.
- Trebuie să schimbați instrumentul PIEZON® PS dacă sunt uzați 2 mm din vârf.
- Folosind un instrument care este uzat, veți deteriora sonotrodul piesei de mână și prin urmare va trebui să cumpărați o nouă piesă de mână.

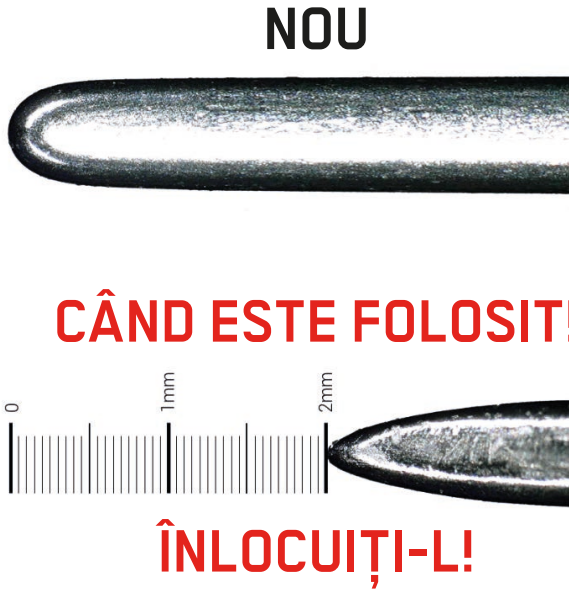

AVERTISMENT: DACĂ AVEȚI 2 MM UZAȚI, NU MAI FOLOSIȚI INSTRUMENTUL PIEZON® PS!!

UTILIZAȚI NUMAI ORIGINALUL NU CUMPĂRAȚI NICIODATĂ O COPIE


"COMPATIBIL" NU ESTE NIMIC MAI MULT DECÂT O COPIE!

► Copiile ieftine care pretind a fi „compatibile” cu EMS PIEZON® sunt pe piață de mult timp. V-au pus tratamentele și echipamentul în pericol!

► Vârfurile „compatibile” nu pot fi comparate cu instrumentul original PIEZON® PS NO PAIN de la EMS. Aceste copii nu corespund niciunui standard de calitate EMS și nu se potrivesc cu precizia EMS Micrometric Swiss Manufacturing. Rezultatul este o suprafață a vârfului care nici măcar nu se apropie de instrumentul original PIEZON® PS NO PAIN. În schimb, generează mișcări neregulate.

► Cu instrumentul original PIEZON® PS NO PAIN, nimic nu se rotește, nimic nu oscilează în cercuri, elipse, cifre de opt sau altele.

Asta înseamnă, de asemenea, că nimic nu se îndoaie, afectând dintele sau gingia. Niciun vârf copiat nu poate fi egal cu instrumentul original PIEZON® PS NO PAIN.

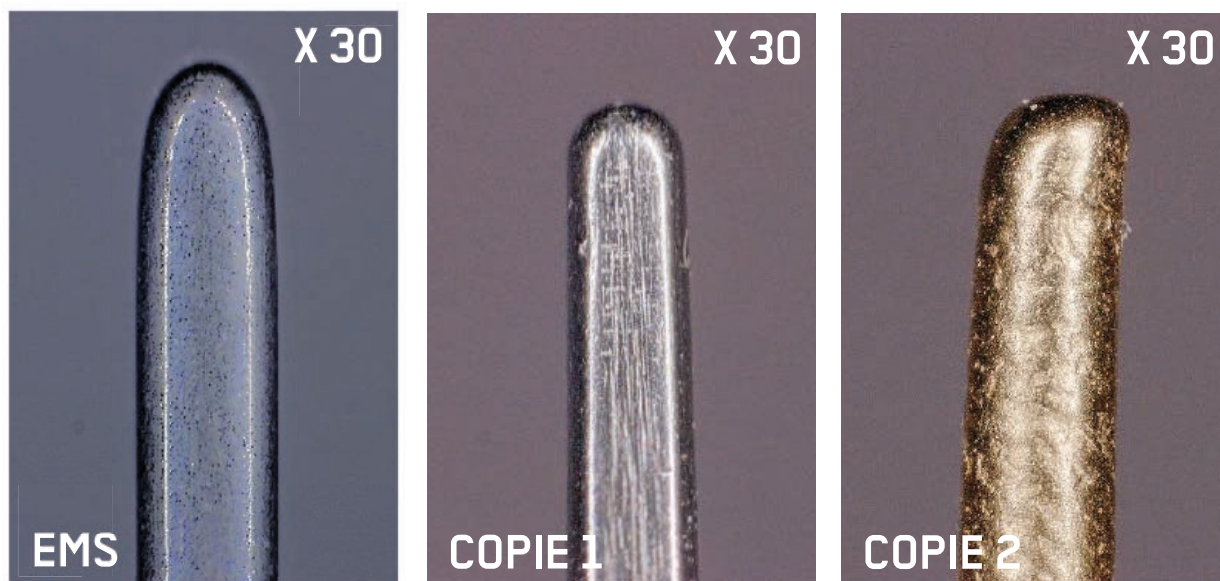


SUPRAFAȚA NETEDĂ A INSTRUMENTULUI PS ESTE UN PARAMETRU CHEIE ÎN TRILOGIA PIEZON® NO PAIN. NICIUN VÂRF ASEMĂNĂTOR NU OFERĂ ACEEAȘI CALITATE A SUPRAFEȚEI.

O COPIE IEFTINĂ POATE PRODUCE MULTE DAUNE

► Protejați-vă echipamentul. Bazați-vă numai pe instrument original PIEZON® PS NO PAIN și echipamentul original EMS. Cu așa-numitele vârfuri „compatibile”, false sau copiate, riscați să stricați și componentele Dumnevoastră EMS premium.

Doar produsele EMS originale sunt aprobate și garantate pentru utilizarea cu echipamentele EMS pentru a folosi Guided Biofilm Therapy. De ce să cumpărați vârfuri copiate fără valoare dacă un tratament cu un vârf original costă doar 10 Cenți?

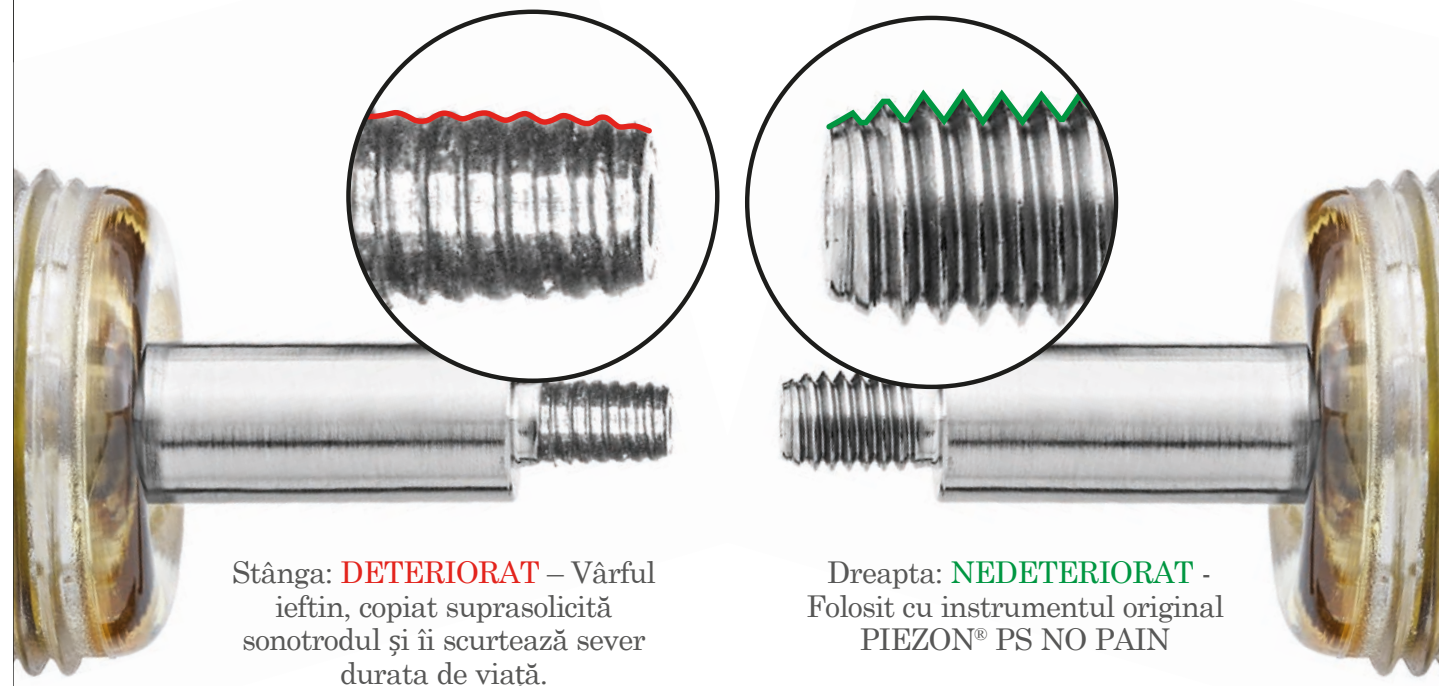

► Investiția în calitatea elvețiană își spune cuvântul: în timp ce majoritatea vârfurilor copiate pot efectua doar 100 până la 200 tratamente de detartraj, instrumentul PIEZON® PS NO PAIN durează mai mult de 1000 tratamente, reducând astfel costul tratamentului la câțiva cenți per pacient. Cât valorează pacientul tău pentru tine?

► Sonotrodul piesei de mână originale PIEZON® este fabricată din titan premium. Nu este însă și cazul copiilor ieftine, ele au același efect ca o freză tăietoare și deteriorează valoroasa piesă de mână, ducând la pierderea garanției!

**PROTEJAȚI DINTII PACIENȚILOR
DUMNEAVOASTRĂ! NU VĂ ASUMAȚI RISCURI
FOLOSIND VÂRFURI COPIATE!**

MAREA GREȘALĂ ÎN A CUMPĂRA IEFTIN



CUMPĂRÂND IEFTIN S-AR PUTEA DOVEDI A FI FOARTE COSTISITOR

Nu există aproape nimic pe lume
ca un om nu poate face un pic rău
și vinde puțin mai ieftin.

Persoana care cumpără doar bazându-se pe preț
este prada legală a acestui om.

Nu este înțelept să plătești prea mult,
dar e mai rău să plătești prea puțin.

Când plătești prea mult, pierzi niște bani - asta e tot.

Când plătești prea puțin, uneori pierzi totul,
pentru că lucrul pe care l-ai cumpărat

este incapabil să facă lucrul pentru care a fost cumpărat.

Legea comună a echilibrului afacerilor interzice
plătind puțin și primind mult - nu există.

Dacă aveți de-a face cu cel mai mic ofertant,
este bine să adăugați ceva pentru riscul pe care îl asumați.

Și dacă faceți asta, veți avea suficient
să plătiți pentru ceva mai bun.

John Ruskin (1819-1900)



**CUMPĂRAȚI DOAR
ORIGINALELE!!**


AVEȚI GRIJĂ DE PACIENȚI, FOLOSIȚI DOAR ORIGINALELE!

PROTEJAȚI-VĂ PACIENȚII

► Pentru a efectua un tratament nedureros fără deteriorarea dintelui, bazați-vă numai pe instrumentul original PIEZON® PS NO PAIN și Pudra AIRFLOW® PLUS de la EMS, Elveția. Cu așa-numitele „compatibile”, adică vârfuri și pudre sau copii false, riscați să distrugeți dinții și gingiile pacienților Dumneavoastră.

► Doar produsele EMS originale sunt aprobate și garantate pentru utilizare în unitățile EMS pentru a practica revoluționara Guided Biofilm Therapy.

► Instrumentele ieftine, copiate vă vor oferi mișcări necontrolate, materiale de calitate scăzută și ruperea vârfului. Confortul pacientului este inevitabil compromis. Tehnologia PIEZON® NO PAIN oferă cel mai înalt confort pacientului.

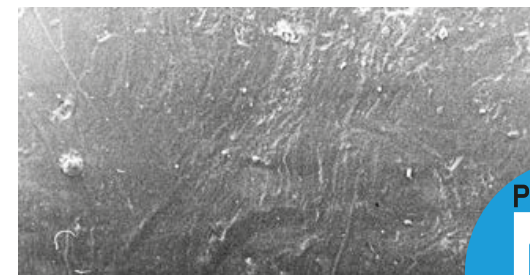

În stânga: **RUGOS** – Suprafața dintelui tratată cu instrumentul X
În dreapta: **NETED** - Suprafața dintelui tratată cu metoda originală PIEZON și instrumentele EMS, elvețiene



AIRFLOW®: ATENȚIE LA AȘA-ZISELE PULBERI „COMPATIBILE”

► Mulți furnizori susțin că pulberile lor imitate sunt mai accesibile și funcționează bine cu echipamente sau dispozitive EMS. De fapt, este fix contrariul. Aceste pulberi perforează cu ușurință piesele de mână EMS AIRFLOW® și deteriorează interiorul dispozitivelor EMS AIRFLOW®.

► Vă puteți imagina ce rău pot face aceste pulberi dinților pacienților Dumneavoastră? EMS recomandă insistent ca medicii stomatologi să-și trateze pacienții numai cu pulberi EMS.

► EMS avertizează cu insistență împotriva utilizării pulberilor neaprobate de la imitatori sau chiar falsificatori. Aveți grijă! Nu respectă criteriile noastre stricte de calitate. Pacienții Dumneavoastră vor fi cei care vor trebui să plătească prețul pentru aceste soluții de „reducere a costurilor”.

► Tratați-vă pacienții numai cu protocolul clinic GBT! Veți câștiga pacienți la recall cu GBT. Cu metode sau materiale copiate, îi veți pierde.



Urmărește cum piesa noastră de mână AIRFLOW® este distrusă în doar 2 minute cu o pudră copiată. Cum credeți că va arăta asta în gura pacienților Dumneavoastră ?



► ESTE SOLUȚIA SISTEMATICĂ, PREDICTIBILĂ PENTRU GESTIONAREA PLĂCII BACTERIENE ORALE ÎN PROFILAXIA PROFESIONALĂ, FOLOSIND TEHNOLOGII DE ULTIMĂ GENERAȚIE AIRFLOW®, PERIOFLOW® ȘI PIEZON®. ESTE DOVEDITĂ PRIN EVIDENȚĂ ȘTIINȚIFICĂ.

08 RECALL

PACIENT SĂNĂTOS = PACIENT FERICIT

- Programați următoarele sedințe (recall-uri) în funcție de evaluarea riscului
- Întrebați-l pe pacient dacă i-a plăcut tratamentul

07 VERIFICAȚI

FACEȚI-VĂ PACIENTUL SĂ ZĂMBEASCĂ

- Efectuați o verificare finală pentru placa bacteriană rămasă
- Asigurați-vă că tartrul este complet eliminat
 - Diagnosticați cu precizie cariile
 - Protejați cu fluor
 - Nu mai este nevoie să lustruiți

06 PIEZON® PS

ÎNDEPĂRȚAȚI TARTRUL RĂMAS

- Utilizați instrumentul minim invaziv EMS PIEZON® PS supra și subgingival până la 10 mm ► Curățați pungile parodontale >10 mm cu mini chiurete
- Utilizați instrumentul EMS PIEZON® PI în jurul implantelor până la 3 mm subgingival și pe restaurări

05 PERIOFLOW®

ÎNDEPĂRȚAȚI PLACA BACTERIANĂ DIN PUNGILE PARODONTALE > 4 LA 9 MM

- Utilizați pudra AIRFLOW® PLUS pe dinții naturali în pungile parodontale adânci și furcații radiculare și pe implanturi
- Utilizați noul vârf, mai subțire PERIOFLOW®

01 EVALUAREA ȘI CONTROLUL INFECȚIEI

EVALUAȚI FIECARE CAZ CLINIC ȘI IMPLEMENTAȚI MĂSURI DE IGIENĂ

- Începeți prin clătirea cu apă de gură BacterX® Pro ► Examinați dinții, gingia și țesuturile parodontale ► Examinați implanturile și țesuturile peri-implant

02 EVIDENȚIAȚI

FACEȚI VIZIBILĂ PLACA BACTERIANĂ

- Arătați pacienților placa bacteriană evidențiată și zonele lor problematice cu ajutorul EMS Biofilm Discloser ► Colorarea vă va ghida în îndepărtarea plăcii bacteriene ► Odată ce placa bacteriană este îndepărtată, tartrul este mai ușor de detectat

03 MOTIVAȚI


CREȘTEȚI CONȘTIENTIZAREA ȘI EDUCAȚI PACIENȚII

- Subliniați rolul prevenției ► Instruiți-vă pacienții cu privire la igiena orală ► EMS recomandă periute interdentare sau ață dentară ca și periute electrice sau manuale și pastă AIRFLOW® pe bază de eritritol pentru îngrijirea zilnică de acasă

04 AIRFLOW® MAX

ÎNDEPĂRȚAȚI PLACA BACTERIANĂ, PETELE ȘI TARTRUL ÎNCIPIENT

- Utilizați AIRFLOW® MAX pe dinți naturali, restaurări și implanturi ► Îndepărtați placa bacteriană supra și subgingival până la 4 mm folosind pudra AIRFLOW® PLUS 14 μm ► De asemenea, îndepărtați placa bacteriană de pe gingie, limbă și palat ► Îndepărtați petele rămase pe smalț folosind pudra AIRFLOW® CLASSIC Comfort

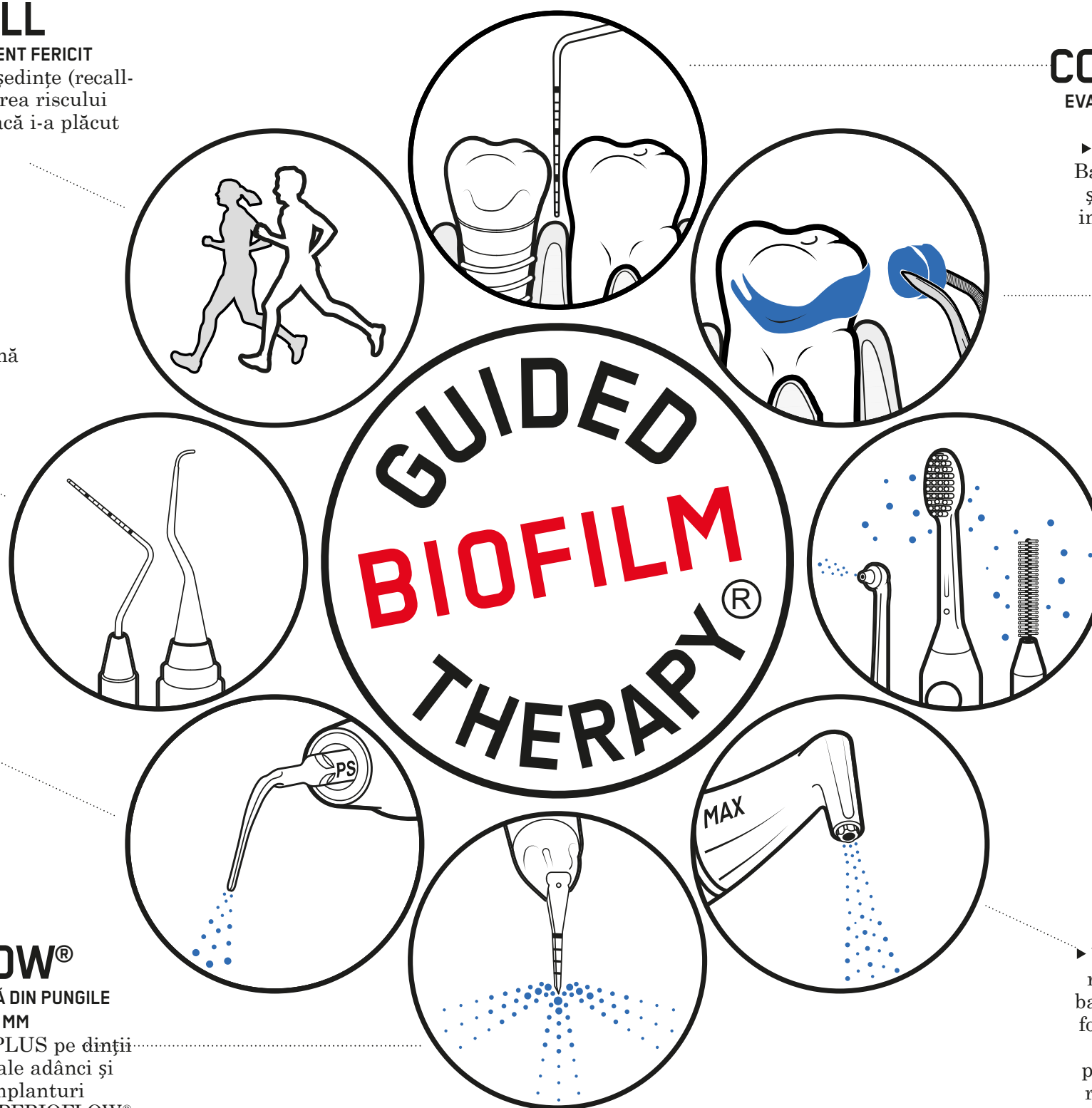

► Tehnologia PIEZON® este o piatră de temelie a acestui protocol GBT. Clinicienii care au fost obișnuiți inițial cu utilizarea exclusivă a instrumentelor de mână și descoperă tehnologia GBT și EMS PIEZON® sunt uimiți de rezultate, eficiență și conformitate atunci când ambele sunt combinate. Minim invaziv, tratamentul oferă cel mai înalt nivel de confort, siguranță și eficiență.

“Tocmai am făcut un detartraj de rutină cu igienistul meu și nu pot să cred cât de diferit se simte.

Când mi se făcea tratamentul, dinții mei de jos, din față erau foarte sensibili, dar astăzi a fost ca și când nu îi atingea deloc. Nu am simțit nimic!”

HARRIS CHARLOTTE,
PACIENT

“Cu dispozitivele EMS, putem să ne motivăm pacienții în ceea ce privește profilaxia. Printr-un sentiment plăcut al cavității bucale - factorul BUNĂSTARE. Îndepărtarea petelor - factorul FRUMUSEȚE. Îndepărtarea plăcii bacteriene 100% - factorul SĂNĂTATE.”

MICHAELA GRUL
MEDIC STOMATOLOG

“Dispozitivele companiei EMS ne-au ajutat să simplificăm foarte mult protocolul „sedințelor noastre de profilaxie”, făcându-l mai blând cu substanța și mai prietenos cu pacientul (mai puțină durere). După mai mult de 3 ani, profilaxia a devenit o parte tehnică și economică foarte importantă a cabinetului nostru stomatologic mulțumită competențelor științifice și tehnice (de ex. NO PAIN cu vârful PS, Pudra PLUS) de la EMS.”

DR. NADINE STRAFELA-BASTENDORF,
MEDIC STOMATOLOG

“PIEZON® PS este cu adevărat cel mai complet instrument pentru îndepărtarea tartrului dur. Designul său subțire permite utilizarea universală supra și subgingival în modul cel mai puțin invaziv și cu cel mai înalt confort pentru pacient.”

CELSDA COSTA
ȘEF SDA & RDH - ELVEȚIA

“Presiunea necesară pentru a îndepărta depozitele este foarte mică, ceea ce a făcut ca detartrajul să fie mai relaxant rezultând mai puțină oboseală a operatorului”

FAYE DONALD
RDH - REGATUL UNIT

“I FEEL GOOD”

“Mi-a plăcut foarte mult GBT. Prima dată fără durere în timpul ultrasunetelor.

Voi veni cu bucurie o dată la 3 luni dacă este urmat același tratament”

ALISSON BENON
PACIENTĂ

“Sunt atât de fericită cu GBT, nu mai pot să accept o altă metodă de curățare a dinților. Mulțumită GBT, îmi vizitez bucuroasă și în mod regulat medicul stomatolog pentru profilaxia mea. Și de fiecare dată când părăsesc cabinetul sunt mulțumită de curățarea mea și de zâmbetul meu alb strălucitor! Pentru mine profilaxia cu GBT a devenit o experiență grozavă și o recomand cu drag!”

SABINE PAVICIC, PACIENTĂ

**CITIȚI MAI MULTE
TESTIMONIALE**



PACIENȚII CER **BUNĂSTARE** ȘI NU DURERE



GBT

E.M.S.
Electro Medical Systems S.A.
Ch. de la Vuarpillière 31
1260 Nyon - Elveția
+41229944700
EMS-DENTAL.COM

EMS 
MAKE ME SMILE.